

πλαισιο ●

TURBO X

Μαξιλάρι Μασάζ



Οδηγίες Χρήσης

Σημείωση: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και/ή τα εξαρτήματα αυτής της συσκευής μπορεί ν' αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Περιεχόμενα

1	Προειδοποιήσεις	3
2	Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας	3
3	Εισαγωγή	6
4	Εξαρτήματα	7
5	Χρήση της συσκευής	8
6	Αποθήκευση μετά τη χρήση	10
7	Καθαρισμός του μαξιλαριού μασάζ.....	10
8	Αντιμετώπιση προβλημάτων	11

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΑΥΤΕΣ
ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΦΥΛΑΞΕΤΕ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

1 Προειδοποιήσεις

Σας συνιστούμε να μιλήσετε με τον γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το Μαξιλάρι Μασάζ, ειδικά αν έχετε προβλήματα υγείας.

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, θα πρέπει να διαβάσετε και να ακολουθήσετε όλες τις προειδοποιήσεις ασφάλειας και τις οδηγίες που περιέχονται σ' αυτό το έντυπο, ακόμη κι αν είστε εξοικειωμένοι με τέτοιου είδους προϊόντα.

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός κι αν υπάρχει επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Θα πρέπει να υπάρχει επίβλεψη ώστε τα παιδιά να μην παίζουν με τη συσκευή. Αυτή η συσκευή διαθέτει θερμαινόμενες επιφάνειες. Τα άτομα που δεν έχουν αίσθηση της θερμότητας θα πρέπει να είναι ιδιαίτερως προσεκτικά κατά τη χρήση αυτής της συσκευής.

2 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας



Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Σας συνιστούμε να φυλάξετε αυτές τις οδηγίες χρήσης και για πιθανή μελλοντική ανάγνωση.

MHN χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν ως υποκατάστατο ιατρικής συσκευής και ιατρικής φροντίδας.

MHN χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για περισσότερα από 15 λεπτά κάθε φορά. Αφήστε τουλάχιστον 30 λεπτά ώστε να ψύχεται η συσκευή μεταξύ των χρήσεων. Η παρατεταμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση της συσκευής και μείωση της διάρκειας ζωής της.

Η χρήση από παιδιά ή από άτομα που έχουν διάφορες αναπηρίες μπορεί να καταστεί επικίνδυνη. Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να υπάρχει επίβλεψη.



Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί από πολύ μικρά παιδιά (ηλικίας 0-3 ετών).

Τα παιδιά με ηλικία κάτω των τριών ετών δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευή λόγω του γεγονότος ότι δεν γνωρίζουν πως να αντιδράσουν και τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση υπερθέρμανσης.

Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που δεν αισθάνονται τη θερμότητα καθώς και από άλλα πολύ ευάλωτα άτομα που δεν μπορούν να αντιδράσουν σε περίπτωση υπερθέρμανσης, εφόσον χρησιμοποιούν τη λειτουργία θέρμανσης.

Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για ιατρική χρήση. Προορίζεται μόνο για να σας παρέχει άνετο μασάζ.

Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες και ανησυχίες σχετικά με την υγεία σας, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή.

Αν έχετε βηματοδότη, θα πρέπει να μιλήσετε με τον γιατρό σας πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Σε περίπτωση εγκυμοσύνης ή σε περίπτωση που έχετε διαβήτη ή άλλη ασθένεια, θα πρέπει να συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.

Το μασάζ πρέπει να είναι ευχάριστο και άνετο. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί πόνος ή δυσφορία ή εάν αισθανθείτε πόνο σε κάποιο μυ ή άρθρωση για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, σταματήστε τη χρήση και συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε συσκευές μασάζ στο πρόσωπο, σε ανοιχτές πληγές, σε αποχρωματισμένες περιοχές, σε περιοχές με κακή κυκλοφορία ή σε οποιεσδήποτε περιοχές του σώματος που είναι πρησμένες, έχουν έγκαυμα, έχουν φλεγμονή ή όπου υπάρχουν εκδορές ή πληγές στο δέρμα.

ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή υπό την επήρεια αλκοόλ, υπνωτικών χαπιών ή ηρεμιστικών.

Είναι φυσιολογικό να αισθάνεστε φαγούρα, μυρμήγκιασμα ή να παρατηρήσετε ερυθρότητα στην περιοχή του δέρματος όπου χρησιμοποιήθηκε η συσκευή μασάζ, αμέσως μετά τη χρήση. Αυτά τα συμπτώματα θα εξαφανιστούν σύντομα. Ωστόσο, εάν αυτά τα συμπτώματα παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε το γιατρό σας, καθώς μπορεί να υπάρχει κάποιο πιο σοβαρό υποκείμενο ιατρικό πρόβλημα.

Για να αποφύγετε μώλωπες, μην πιέζετε πολύ δυνατά τη συσκευή μασάζ.

ΜΗΝ αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν χρησιμοποιείται ή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.

Να είστε προσεκτικοί να μην αγγίζουν τα παιδιά τη συσκευή κατά τη διάρκεια της χρήσης και βεβαιωθείτε ότι δεν θα μπορούν να φτάσουν και να τραβήξουν το καλώδιο ρεύματος.

Για προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ή το τροφοδοτικό ρεύματος σε νερό ή άλλα υγρά.

ΜΗ χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το προϊόν κοντά σε νεροχύτες, μπανιέρες ή ντους, όπου υπάρχει στάσιμο νερό ή κοντά σε τρεχούμενο νερό.

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μπανιέρες, ντους, σπα, πισίνες κ.λπ.

Αποσυνδέετε πάντα το τροφοδοτικό από το ρεύμα μετά από τη χρήση.

ΜΗ χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή εάν έχει πέσει κάτω ή αν έχει υποστεί ζημιά κάποιο τμήμα της (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου ή του τροφοδοτικού).

Η χρήση αξεσουάρ που δεν προορίζονται για χρήση με αυτήν τη συσκευή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς στο χρήστη ή ζημιά και βλάβη στη συσκευή.

ΜΗΝ τοποθετείτε αυτή τη συσκευή πάνω σε άλλες συσκευές, σε ανώμαλες επιφάνειες ή σε σημεία όπου υπάρχουν σε κοντινή απόσταση πηγές θερμότητας (π.χ. καλοριφέρ ή σόμπες), άμεσο ηλιακό φως ή υπερβολική σκόνη. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετηθεί κοντά σε πηγές ζεστού αέρα, ηλεκτρικούς καυστήρες ή κοντά σε ζεστό φούρνο.

Θα πρέπει πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή πριν την αποσυνδέσετε από το τροφοδοτικό. Μην τραβάτε ποτέ από το καλώδιο για να αποσυνδέσετε το τροφοδοτικό ρεύματος από τη συσκευή ή από το ρεύμα. Να πιάνετε πάντα από το φίζ/ τον προσαρμογέα.

Σε αυτήν τη συσκευή δεν υπάρχουν εξαρτήματα που να μπορεί να επισκευάσει ο χρήστης.

Εάν αυτή η συσκευή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από άλλους, θα πρέπει να τους δώσετε και αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά και τα μωρά δεν θα παίξουν με πλαστικές σακούλες ή με κάποιο από τα σακουλάκια της συσκευασίας.

ΜΗΝ μεταχειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή βρεγμένα πόδια, ώστε να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

ΜΗΝ μεταφέρετε τη συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο ρεύματος.

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ κοιμάστε ή όταν αισθάνεστε υπνηλία.

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν πριν πέσετε για ύπνο. Το μασάζ έχει διεγερτικό αποτέλεσμα και μπορεί να καθυστερήσει τον ύπνο.

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν ενώ έχετε πέσει στο κρεβάτι.

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε εργαλεία ή βαρύ εξοπλισμό κατά τη χρήση αυτής της συσκευής.

ΜΗΝ καλύπτετε τη συσκευή κατά τη χρήση. Ενδέχεται να υπερθερμανθεί και μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, ζημιά σε περιουσία ή ακόμη και τραυματισμός ατόμων.

Η παρατεταμένη εφαρμογή θέρμανσης μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στο δέρμα.

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για ανθρώπινη χρήση. Δεν είναι κατάλληλη για ζώα και κατοικίδια.

ΜΗΝ επιτρέπτε στα κατοικίδια ζώα να ξαπλώνουν πάνω στη συσκευή ή να μασούν το ηλεκτρικό καλώδιο κ.λπ.

Μην αγγίζετε τη συσκευή σε περίπτωση που έχει πέσει μέσα σε νερό. Αποσυνδέστε την αμέσως από το ρεύμα.

Τοποθετήστε σωστά το καλώδιο τροφοδοσίας, έτσι ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να πατήσετε πάνω του, να πέσετε πάνω του ή να τρυπηθεί από αντικείμενα που υπάρχουν κοντά του ή πάνω του.

ΜΗΝ αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά ή εντός περιοχών στις οποίες επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες.

Εάν το τροφοδοτικό ή το καλώδιο ρεύματος είναι κατεστραμμένα ή έχουν φθαρεί, δεν θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσετε. Πρέπει να τα πετάξετε στα απορρίμματα ώστε να αποφευχθούν άλλοι πιθανοί κίνδυνοι. ΜΟΝΟ για οικιακή χρήση. Η βιομηχανική ή εμπορική χρήση θα ακυρώσει την εγγύηση.

Καμία ευθύνη δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη μη συμμόρφωσή σας με αυτές τις οδηγίες ή σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης ακατάλληλης χρήσης ή κακής διαχείρισης της συσκευής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Εάν έχετε οποιοσδήποτε ανησυχίες σχετικά με την υγεία σας, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή. Άτομα με βηματοδότη δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουν αυτή τη συσκευή. Εάν αισθανθείτε πόνο σε κάποιο μυ ή άρθρωση για μεγάλο χρονικό διάστημα, διακόψτε τη χρήση και συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Ο επίμονος πόνος μπορεί να δηλώνει ότι υπάρχει κάποιο πιο σοβαρό υποκείμενο ιατρικό πρόβλημα.

Πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας σχετικά με το φισ και το καλώδιο τροφοδοσίας

Εάν χρησιμοποιείτε μπαλαντέζα:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της μπαλαντέζας πρέπει να ταιριάζουν ή και να υπερβαίνουν τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται για αυτή τη συσκευή. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη πάγκων ή τραπέζιων ή να έρχεται σε επαφή με σύμπτες ή άλλες ζεστές επιφάνειες.

Εάν το καλώδιο ή το φισ είναι φθαρμένα ή κατεστραμμένα, μην τα χρησιμοποιήσετε.

Να αποσυνδέετε το καλώδιο από την πρίζα ρεύματος πιάνοντας από το σώμα του φισ ρεύματος - μην τραβάτε από το σώμα του καλωδίου ρεύματος.

3 Εισαγωγή


Αυτό το μαξιλάρι κάνει μασάζ χρησιμοποιώντας περιστρεφόμενες κεφαλές, και είναι σχεδιασμένο για μασάζ στον αυχένα, στους ώμους, στις γάμπες, στους μηρούς και στην κοιλιά. Μπορείτε εύκολα να το τοποθετήσετε στην καρέκλα στο σπίτι ή στο γραφείο σας για να έχετε συνεχή ανακούφιση με άνετο τρόπο, παρόμοιο με αυτό που θα σας έδινε ένα κανονικό μασάζ από άνθρωπο.

Η χρήση της συσκευής μασάζ μπορεί να βελτιώσει άμεσα την κυκλοφορία του αίματος στους μυϊκούς ιστούς και να σας ανακουφίσει από την κόπωση.

Η λειτουργία θέρμανσης έχει την ικανότητα να εμπλουτίζει την αίσθηση ευεξίας όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις περιστρεφόμενες κεφαλές. Εντούτοις, μπορεί και να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα. Είναι ιδανική για μια απόλυτα χαλαρωτική θεραπεία.

Ο εργονομικός σχεδιασμός επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό και την άνεση κατά τη διάρκεια της χρήσης.

4 Εξαρτήματα

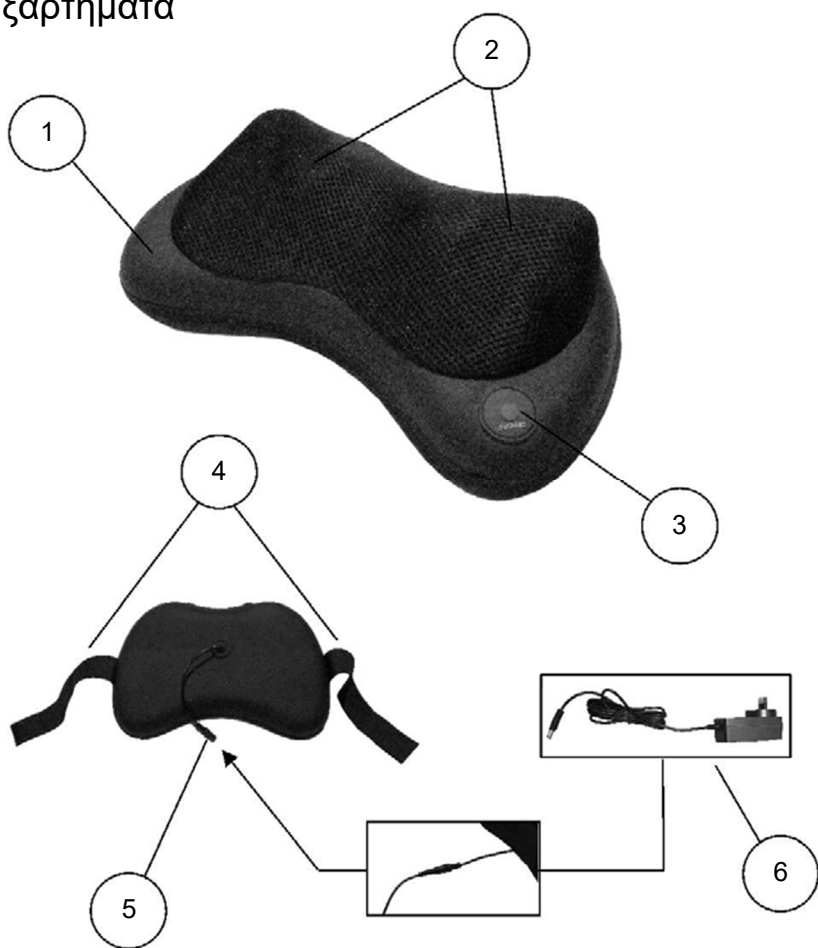

1	Σώμα του μαξιλαριού μασάζ	4	Ελαστικός ιμάντας
2	Περιστρεφόμενες κεφαλές μασάζ	5	Υποδοχή καλωδίου ρεύματος
3	Πλήκτρο επιλογής λειτουργίας: Μασάζ/ Θέρμανση/ Απενεργοπ.	6	Τροφοδοτικό ρεύματος ευρωπαϊκού τύπου (ΕΥ)

5 Χρήση της συσκευής


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ξεχάσετε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή μασάζ μετά από τα συνιστώμενα 15 λεπτά χρήσης, η συσκευή μασάζ θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από περίπου 20 λεπτά.

Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή μασάζ για περισσότερα από 15 λεπτά κάθε φορά και να αφήνετε μια χρονική περίοδο ψύξης περίπου 30 λεπτών μεταξύ των χρήσεων.

Καλό είναι να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για περισσότερες από 2 φορές τη μέρα (δηλαδή συνολικά 30 λεπτά τη μέρα). Να θυμάστε πάντοτε να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

5.1 Σύνδεση στο ρεύμα


- Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης.
- Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος του τροφοδοτικού στην υποδοχή που υπάρχει στη συσκευή μασάζ.

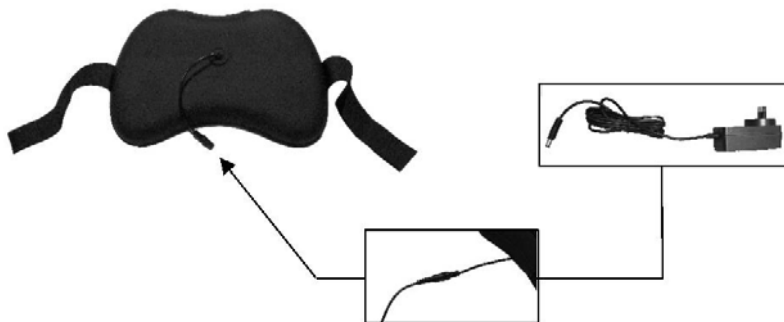

- Συνδέστε το τροφοδοτικό στο ρεύμα.
- Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

5.2 Για να ελέγξετε τη λειτουργία μασάζ

- Πιέστε τον διακόπτη On/ Off (ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης, ο οποίος βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία του μαξιλαριού μασάζ).

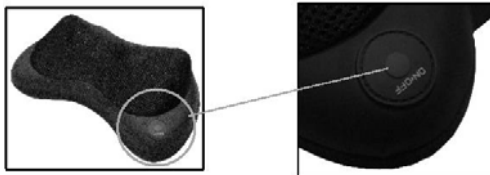

- Αυτή η συσκευή μασάζ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενώ είστε ξαπλωμένοι στο πάτωμα ή καθιστοί σε καρέκλα.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ελαστικούς ιμάντες στο πίσω μέρος του μαξιλαριού μασάζ για να το στερεώσετε στην καρέκλα σας για μασάζ άνω ή κάτω πλάτης.



- Αυτή η συσκευή μασάζ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για μασάζ στον αυχένα, στον ώμο, στη γάμπα, στο μηρό και στην κοιλιά..
- Μόλις βρείτε την πιο άνετη θέση για τη συσκευή μασάζ στο σώμα σας, πιέστε το πλήκτρο On/ Off (Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης) και οι κεφαλές του μαξιλαριού θα αρχίσουν να περιστρέφονται.
- Μετά από περίπου 1 λεπτό, οι κεφαλές του μαξιλαριού μασάζ θα αρχίσουν να περιστρέφονται αντίθετα.
- Μετά από περίπου άλλο 1 λεπτό, οι κεφαλές του μαξιλαριού μασάζ θα αρχίσουν να περιστρέφονται και πάλι αντίθετα κ.ο.κ.
- Μην χρησιμοποιείτε για περισσότερα από 15 λεπτά κάθε φορά χωρίς να αφήνετε μια χρονική περίοδο ψύξης 30 λεπτών μεταξύ των χρήσεων.
Σημείωση: Σε περίπτωση που ξεχάσετε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή μασάζ μετά από τα συνιστώμενα 15 λεπτά χρήσης, η συσκευή μασάζ θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από περίπου 20 λεπτά.
- Ενώ χρησιμοποιείτε το μαξιλάρι μασάζ, πιέστε το πλήκτρο On/ Off (Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης) για περίπου 2 δευτερόλεπτα (κρατήστε πατημένο) για να απενεργοποιήσετε το μαξιλάρι μασάζ.
Σημείωση: Αποφύγετε τη χρήση του μαξιλαριού μασάζ πριν πάτε για ύπνο ή σε περίπτωση που νυστάζετε πολύ γιατί το μασάζ έχει διεγερτικό αποτέλεσμα και θα σας αποτρέψει από το να κοιμηθείτε.

5.3 Λειτουργία θέρμανσης

- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία θέρμανσης, πιέστε το πλήκτρο On/ Off (Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης) για να ξεκινήσουν να περιστρέφονται οι κεφαλές μασάζ.
- Πιέστε ξανά το πλήκτρο On / Off (Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης) και οι περιστρεφόμενες κεφαλές θα συνεχίσουν να περιστρέφονται ενώ ταυτόχρονα θα ανάψει η ένδειξη θέρμανσης με κόκκινο χρώμα και θα προσδώσει κόκκινο χρώμα σε όλη την επιφάνεια του μαξιλαριού μασάζ.
- Μετά από περίπου 1 λεπτό οι κεφαλές του μαξιλαριού μασάζ θα αρχίσουν να περιστρέφονται αντίθετα.
- Μετά από περίπου άλλο 1 λεπτό, οι κεφαλές του μαξιλαριού μασάζ θα αρχίσουν να περιστρέφονται και πάλι αντίθετα κ.ο.κ.

Σημείωση: Σε περίπτωση που ξεχάσετε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή μασάζ μετά από τα συνιστώμενα 15 λεπτά χρήσης, η συσκευή μασάζ θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από περίπου 20 λεπτά.

- Ενώ χρησιμοποιείτε το μαξιλάρι μασάζ, πιάστε το πλήκτρο On/ Off (Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης) για περίπου 2 δευτερόλεπτα (κρατήστε πατημένο) για να απενεργοποιήσετε το μαξιλάρι μασάζ.

Σημείωση: Αποφύγετε τη χρήση του μαξιλαριού μασάζ πριν πάτε για ύπνο ή σε περίπτωση που νυστάζετε πολύ γιατί το μασάζ έχει διεγερτικό αποτέλεσμα και θα σας αποτρέψει από το να κοιμηθείτε.

6 Αποθήκευση μετά τη χρήση

- Αφού ολοκληρώσετε τη χρήση του μαξιλαριού μασάζ, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από την υποδοχή ρεύματος που υπάρχει στη συσκευή μασάζ και στη συνέχεια αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από την πρίζα ρεύματος.
- Αποθηκεύστε το μαξιλάρι μασάζ με ασφάλεια στην αρχική συσκευασία του και τοποθετήστε το σε ένα στεγνό μέρος.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο του τροφοδοτικού ρεύματος γύρω από το σώμα του μαξιλαριού μασάζ, καθώς έτσι θα καταστραφεί το καλώδιο με την πάροδο του χρόνου. Απλά μαζέψτε το καλώδιο και τοποθετήστε το δίπλα στο μαξιλάρι μασάζ.

7 Καθαρισμός του μαξιλαριού μασάζ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗ ΒΥΘΙΣΕΤΕ ΤΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΜΑΣΑΖ ΣΕ ΝΕΡΟ Ή ΑΛΛΟ ΥΓΡΟ.

- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή πριν από τον καθαρισμό..
- Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.
- Να καθαρίζετε μόνο με ένα μαλακό, πολύ απαλό σφουγγάρι, ελαφρώς νοτισμένο με νερό.
- ΠΟΤΕ μην αφήνετε νερό ή άλλα υγρά να έρχονται σε επαφή με το μαξιλάρι μασάζ, και ειδικά με την πρίζα ή το τροφοδοτικό ρεύματος.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά καθαριστικά, διαλυτικά, συρματάκι κουζίνας, μαξιλαράκια καθαρισμού, βούρτσες ή ισχυρές χημικές ουσίες που ενδέχεται να είναι εύφλεκτες ή/ και να προκαλέσουν βλάβη στο προϊόν κατά τον καθαρισμό.

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Το μαξιλάρι μασάζ δεν ενεργοποιείται	Δεν υπάρχει τροφοδοσία με ρεύμα	Συνδέστε το τροφοδοτικό ρεύματος σε πρίζα που να λειτουργεί. Αν και πάλι δεν υπάρχει τροφοδοσία, ελέγξτε αν λειτουργεί η πρίζα, συνδέοντας κάποια άλλη συσκευή όπως π.χ. φωτιστικό γραφείου. Αν δεν υπάρχει ρεύμα στην πρίζα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με επαγγελματία ηλεκτρολόγο.
	Το τροφοδοτικό ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή ρεύματος του μαξιλαριού μασάζ	Συνδέστε το μικρό φις του τροφοδοτικού ρεύματος στην υποδοχή ρεύματος που υπάρχει στο μαξιλάρι μασάζ
Η λειτουργία μασάζ δεν ενεργοποιείται	Δεν έχετε ενεργοποιήσει τη συσκευή	Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (On/ Off)
		Ανατρέξτε στο πρόβλημα «Το μαξιλάρι μασάζ δεν ενεργοποιείται» για να βρείτε τη λύση
Η λειτουργία θέρμανσης δεν ενεργοποιείται	Το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (On/ Off) έχει πατηθεί μόνο μία φορά	Ενώ το μαξιλάρι μασάζ είναι απενεργοποιημένο, πιέστε δύο φορές το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (On/ Off)
Το μαξιλάρι μασάζ απενεργοποιείται ενώ προσπαθείτε να επιλέξετε τη λειτουργία θέρμανσης	Πιέσατε το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (On/ Off) για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα	Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (On/ Off) για λιγότερο από δύο δευτερόλεπτα
Η συσκευή δεν απενεργοποιείται ενώ πιέζετε το πλήκτρο On/ Off (Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης)	Δεν έχετε πιέσει το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (On/ Off) για αρκετό χρονικό διάστημα	Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (On/ Off) για περισσότερα από δύο δευτερόλεπτα (κρατήστε πατημένο)
Η συσκευή απενεργοποιείται κατά τη διάρκεια της χρήσης	Η συσκευή διαθέτει λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης η οποία την απενεργοποιεί αυτόματα μετά από περίπου 20 λεπτά συνεχούς χρήσης.	Αφήστε το μαξιλάρι μασάζ να κρυώσει για τουλάχιστον 30 λεπτά και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το ξανά.

Ασφάλεια & Συντήρηση

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημία στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

- Κατά τη χρήση της συσκευής να μένετε μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλές τάσεις και παρόμοια επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού.
- **Προειδοποίηση!** Εάν το προϊόν απορριφθεί στη φωτιά, μπορεί να εκραγεί
- Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σας στον φούρνο μικροκυμάτων γιατί θα προκληθεί έκρηξη της μπαταρίας
- Μη βάψετε ή μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Plaisio Computers
- Απαγορεύεται η χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προϊόντος. Να μην απλώνετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί
- Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη
- Παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με πολλή υγρασία, όπως το μπάνιο. Να μην την αφήσετε να βραχεί ή να υγρανθεί
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον.
- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο το φορτιστή. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης εξαρτημάτων άλλων κατασκευαστών
- Κατά την σύνδεση και αποσύνδεση του φορτιστή από τη συσκευή, να κρατάτε από το βύσμα και όχι από το καλώδιο
- Η φόρτιση της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιείται σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα, καπνός, παραμορφώσεις ή και έκρηξη
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν
- Να μην τοποθετήσετε τη μπαταρία σε νερό γιατί θα προκληθεί βραχυκύκλωμα, με αποτέλεσμα υπερθέρμανση, καπνό, παραμόρφωση ή και έκρηξη
- Παρακαλούμε να μεταχειρίζεστε τη μπαταρία ακολουθώντας τους κανονισμούς (όπως π.χ. περί ανακύκλωσης). Μην πετάξετε τη μπαταρία στα οικιακά απορρίμματα. Μπορεί να προ-κληθεί έκρηξη και μόλυνση του περιβάλλοντος
- Να χρησιμοποιείτε τον παρεχόμενο φορτιστή. Μη φορτίζετε τη μπαταρία συνεχόμενα για περισσότερες από 12 ώρες
- Μην προκαλείτε ζημία στο καλώδιο του φορτιστή λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ζεσταίνοντας το. Μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή αν η υποδοχή είναι χαλαρή στην πρίζα γιατί μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά
- Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο του φορτιστή
- Μην πιάνετε το κινητό σας με βρεγμένα χέρια ενώ φορτίζει. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή σοβαρής ζημιάς της συσκευής σας.
- Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση
- Παρακαλούμε φυλάξτε τη μπαταρία σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά
- Αποσυνδέστε το φορτιστή κατά την διάρκεια καταιγίδας
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημία
- Αν η συσκευή παρουσιάσει διόγκωση παρακαλούμε σταματήστε άμεσα τη χρήση της

Εγγύηση & Όροι χρήσης

Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E., δηλώνει ότι ο εξοπλισμός **Turbo-X Μαξιλάρι Μασάζ** συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/30/EK (EMC) και φέρει τη σήμανση



Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να ζητήσετε από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΙ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://www.plaisio.gr/> ή στο τηλ: 800 11 12345

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικινδύνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση



Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2012/19/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα, αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE.

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82°C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Θέση Σκλήρι, Μαγούλα Αττικής, 19018

www.plaisio.gr

Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία.

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις.

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επικοινωνιακό κέντρο.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατέψτε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.

- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει ορθώς στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντί-στοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η εν-δεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασιζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνων των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιοδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας
12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.
15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.
17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.
18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επι-σκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.
20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έ-χουν προκληθεί από ιούς.
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)

4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντιγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.
4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
 2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
 3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
 4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
 5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
 6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
 7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
 8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
 9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.
- Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.